



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,
unverbindlich
Technischer Support 7/7

+PRO

MEDIZINISCHES PFLEGE BETT WESTFALIA CLASSIC

Das klassische Pflegebett für Seniorenheime, robust, zuverlässig und langlebig.

Darüber hinaus bietet dieses Bett eine Vielzahl technischer Vorteile:

- Höhenverstellung von 35 bis 80 cm
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne
- Elektrische Beinverstellung, manuell klappbar
- Sichere Arbeitslast von 200 kg
- Zentrale Radfeststellvorrichtung
- Handschalter mit selektiver Verriegelungsfunktion
- Serienmäßiges 24-Volt-Antriebssystem
- Lieferung mit Holzbarrieren und Galgen

Art. 285870

Institutionen CHF 3'343.50 exkl. MwSt.



MEDIZINISCHES PFLEGE BETT MIT NIEDRIGER HÖHE REGIA

Elektrisches Pflegebett Typ REGIA, 90 x 200 cm großer Lattenrost, 4-teilig, mit robusten, leicht zu reinigenden Metalllatten.

Elektrische Höhenverstellung von 26 bis 80 cm.

Elektrische Verstellung von Kopf- und Fußteil

Prokliv-Funktion (Sitzposition)

Kopf- und Fußteil aus Primus- oder Primus-Low-Holz

Zentrale Bremsfunktion

Fernbedienung mit Sperrfunktion.

Halbe Holzbarrieren

Galgen

Maximale Belastung: 225 kg

Optionen auf Anfrage gegen Aufpreis (ohne MwSt.):

Nachtlicht unter dem Bett CHF 74.-

Neigungssteuerung auf Anfrage erhältlich CHF 124.-

Art. 287900 90 x 200 cm

Institutionen CHF 3'762.- exkl. MwSt.



PFLEGE BETT LENUS



Das ideale und innovative Niedrigbett für optimale Sturzprävention.

Krankenhausbett mit elektrischer Höhenverstellung von **15 bis 80 cm** und automatischer Arretierung bei Halbwegsstellung bei ca. 38 cm. Die sehr niedrige Position von 15 cm schützt sturzgefährdete Benutzer. Die Höhe von 80 cm ist ideal für die Pflege. Mit Lattenrost 90 x 200 cm, 4-teilig mit robusten Metalllatten, elektrische Verstellung von Kopf- und Fußteil. Kopf- und Fußteil aus Holz, Farbe Buche natur. 2 durchgehende Seitenschutzgitter aus Massivholz.

Doppelrollen Ø 50 mm, paarweise Fest- und Lösen der Rollen über ein Bremspedal am Kopf- und Fußende. Fernbedienung mit Verriegelungsfunktion. Hebevorrichtung mit Griff. Maximale Belastung des Bettes: 225 kg

Art. 287382

Institutionen **CHF 3'226.-** exkl. MwSt.



MEDIZINISCHES PFLEGE BETT XXL DIVISYS 2.0 (120 oder 140 cm)



Elektrische Rückenlehne. Elektrische Beinlehne mit Knickfunktion
 Teilbarer Lattenrostrahmen. Liegefläche aus verschweißten Metalllatten 4 Räder mit einem Durchmesser von 100 mm, unabhängige Bremsen, ohne Holzverkleidung. Amplitude von 34 bis 74 cm
 Kabelfernbedienung. LINAK-Motorisierung.
 Ein Satz Bettgitter nach Wahl:
 AUZENCE (Epoxid-Seitengitter) / CARMEN II (Holz-Seitengitter) & MEDIDOM (ohne Seitengitter)
 Ein Epoxid-Eckhalter. Max. Benutzergewicht 270 kg.

Art. IXL1L11120-CH **120 cm ab** *Institutionen* **CHF 4'554.-** exkl. MwSt

Art. IXL2L11140E-CH **140 cm ab** *Institutionen* **CHF 4'702.50** exkl. MwSt.



Zahlreiche Varianten und Farben für die Holzverkleidung möglich.

MATRATZE ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC



ALOVA-Matratze mit integrierter Fersenentlastung, bestehend aus einem 6 cm dicken viskoelastischen Formschaum mit einer Dichte von 85 kg/m³ auf einer 8 cm dicken Basis aus hochelastischem Formschaum mit einer Dichte von 38 kg/m³.

Mittlere Tragfähigkeit im Kopfbereich, feste Tragfähigkeit im Mittelbereich, weiche Tragfähigkeit im Fußbereich

Abmessungen: 198 x 88 x 14 cm

Integraler Schutz aus siebbedrucktem Polyurethan, bi-elastisch, atmungsaktiv und sehr widerstandsfähig. Reißverschluss an 3 Seiten.

Bezug maschinenwaschbar bei 90 °C. Maximale Belastung: 130 kg

Art. VMA63RC-HIPH

Institutionen CHF 445.50 exkl. MwSt.

Alova NOVAFORM XL 120 x 200 cm / Max. Belastung 135 kg

Art. PRO-VNOVA120-HIP3_R1

Institutionen CHF 720.- exkl. MwSt.

Alova NOVAFORM XL 140 x 200 cm / Max. Belastung 135 kg

Art. PRO-VNOVA140-HIP3_R1

Institutionen CHF 774.- exkl. MwSt.

Alova XXL BARIATRISCH 120 x 200 cm / Max. Belastung 270 kg

Art. VMA120BAR

Institutionen CHF 891.- exkl. MwSt.

Alova XXL BARIATRISCH 140 x 200 cm / Max. Belastung 270 kg

Art. VMA140BAR

Institutionen CHF 1'125.- exkl. MwSt.



LUFTMATRATZE AXTAIR ONE PLUS



Komplett mit Matratze, integralem Bezug aus Promust CIC und Kompressor.

Matratze bestehend aus 18 Zellen mit 12 cm therapeutischer Lufthöhe und einer Schaumstoffunterlage von mehr als 5 cm. Notfall-CPR-Ventil.

Automatisches und kontinuierliches Berechnungssystem für den Aufblasdruck entsprechend dem Morphotyp des Patienten. 1 Betriebsmodus: Dynamisch

Komfort-Einstellungen: individuelle Einstellung des Füllgrades und Sitzpositionsmanagement

Optische und akustische Alarme

Geeignet für Personen mit einem Gewicht von 30 bis 165 kg.

Art. VKONEP-090G3G-CH

Institutionen CHF 1'134.- exkl. MwSt.



LUFTMATRATZE AUTOMORPHO PLUS CIC



Prävention und Behandlung von multiplen Druckgeschwüren:

- **Leistung:** Automatisches System zur Berechnung des für den Patienten geeigneten Aufblasdrucks.
- **Sicherheit:** optische und akustische Alarmer, automatische Tastensperre, schnelles Aufpumpen der Matratze, neues CPR-Ventil.
- **Wirksamkeit:** klinisch erprobtes Wirkprinzip zur Unterstützung der Behandlung von Dekubitus im Stadium 1 bis 4. Drei Modi zur Unterstützung der Pflege.
- **Ergonomie:** geeignet für Personen von **30 kg bis 180 kg**
- **4 Fersendruckentlastungen serienmäßig**
- **Sitzpositionsmanagement**
- **Individuelle Komforteinstellung**
- **CIC-Bezug mit antibakterieller Silberionenbehandlung, waschbar bei 90 °C**

3 verfügbare Aufblasmodi:

- **Wechselmodus:** abwechselnd jede zweite Zelle (mit Ausnahme der beiden Zellen am Kopfende).
- Gesamtzyklusdauer 9 bis 14 Minuten.
- **Statischer Modus:** Statischer Niederdruckmodus, pumpt alle Zellen der Matratze auf einen konstanten Druck auf dem niedrigsten Innendruckniveau auf und fördert das Einsinken des Patienten in die Unterlage, um die Auflagefläche zu vergrößern und so den durchschnittlichen Druck auf die Schnittstelle zu verringern.
- **Pflegemodus:** Macht die Matratzenoberfläche fest, um die Handhabung des Patienten bei der Pflege oder beim Anheben zu erleichtern. Automatische Rückkehr zum vorherigen Modus nach 30 Minuten.

Art. VKAUTOP-090G3G-CH

Institutionen **CHF 2'124.-** exkl. MwSt.



LUFTMATRATZE AUTOMORPHO AXENSOR

Das neueste Produkt der AXTAIR-Reihe, das das patentierte Verfahren zur Bestimmung des Aufblasdrucks entsprechend der Körperform des Patienten übernimmt.

Die Axtair Automorpho ist kommunikationsfähig und vollautomatisch.

FERSENENTLASTUNG

- Entlüftung der 4 Zellen am Fußende der Matratze möglich.

AXENSOR

- Automatische und permanente Anpassung des Drucks in flacher Position und entsprechend der Neigung der Rückenlehne des Bettes.

CIC-BEZUG

- Verschweißter Bezug mit antibakterieller Behandlung durch Ag⁺-Ionen (Verhinderung von Kreuzkontaminationen).



Matratze:

Benutzergewicht:	30 – 165 kg
Gewicht der Unterlage:	8 kg
Matratzengröße:	195 x 87 x 17 cm
Luftzellen:	18 Zellen, Höhe 12 cm, aus Polyurethanether
Kopfzellen:	3 statische Zellen
Schnelle Entlüftung:	Weniger als 15 Sekunden / CPR-Ventil
Oberer Bezug:	Abnehmbar, flüssigkeitsundurchlässiges und wasserdampfdurchlässiges Material. Polyurethan/Polycarbonat auf mit Silberionen veredeltem Gewebe. Verschweißte Verbindung

Art. VKAXE12-090A3A-CH

Institutionen CHF 2'395.- exkl. MwSt

LUFTMATRATZE AXTAIR XXL Bariatric

Matratze bestehend aus 21 Zellen mit einer Höhe von 20 cm therapeutischer Luft und 2 stabilisierenden Rändern, die den Transfer erleichtern.

2 Breiten verfügbar: 120 cm oder 140 cm

Transportmodus mit einer Autonomie von 8 Stunden

Patentiertes System zur automatischen und kontinuierlichen Berechnung des Aufblasdrucks entsprechend dem Morphotyp des Patienten



3 Betriebsmodi: Dynamisch, statisch mit niedrigem Druck und Pflege

Komfort-Einstellung unabhängig vom verwendeten Modus und der Position des Patienten verfügbar

Optische und akustische Alarme und Notfall-CPR-Ventil

Geeignet für Personen von **100 kg bis 270 kg**

Art. VKXXL-120A2A-CH 120 cm

Institutionen **CHF 4'455.-** exkl. MwSt.

Art. VKXXL-140A2A-CH 140 cm

Institutionen **CHF 4'896.-** exkl. MwSt.



KRANKENBETT TRIGONORM

Schwarzes Aluminiumgestell auf drei Rollen, davon 2 mit Bremse.
Tischplatte aus Kunstharz in Holzoptik, 77 x 43 cm.
Höhenverstellbar von 60 bis 95 cm und kippbar.
Maximale Belastung: 20 kg.

Art. S-1111

Institutionen **CHF 282.15** exkl. MwSt.




KRANKENBETT TRIGONORM „KRANKENHAUS“

Krankenhaustisch TRIGONORM Modell „Hospital“
Tischplatte 77 x 40 cm aus hellgrauem Kunstharzlaminat
mit 7 mm breiten Kanten aus Aluminium an der
Längsseite und grauem ABS an der Breitseite.
Höhenverstellbar von 78 bis 110 cm, 3 Doppelrollen mit
Bremse. Gestell aus geschweißten Stahlrohren, leicht
höhenverstellbar.
Maximale Belastung: 20 kg.

Art. H-2322

Institutionen **CHF 420.75** exkl. MwSt.




KRANKENBETT EVILENCE

Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder (760 bis 1150 mm)
2 Tischplatten, Stärke 19 mm
Standardfarbe der Melaminbeschichtung: Buche hell.
Mehrere Holzfarben zur Auswahl.
> 1 feststehend (290 x 460 mm) mit 3-seitiger Epoxid-Galerie
> 1 neigbar (640 x 460 mm) mittels Zahnstange

Leseleiste auf großer Ablage.
C-förmiges Gestell, Farbe Epoxid RAL 9002 strukturiert,
ausgestattet mit 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Art. T380049

Institutionen **CHF 329.20** exkl. MwSt.




Krankentisch CONFORLENCE

Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder (760 bis 1170 mm)
 2 Tischplatten, Stärke 19 mm
 Standardfarbe der Melaminbeschichtung: Buche hell.
 Mehrere Holzfarben zur Auswahl.
 > 1 feststehend (430 x 300 mm) mit 3-seitiger Epoxid-Galerie
 > 1 neigbar (610 x 430 mm) mittels Zahnstange
 Leseleiste auf großer Ablagefläche.
 C-förmiges Gestell, Farbe Epoxid RAL 9002 strukturiert,
 ausgestattet mit 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Art. T169-00

Institutionen CHF 540.- exkl. MwSt.



NACHTTISCH CHERUSKER

Nachtisch mit integriertem Krankentisch.
 Abmessungen: 87 cm hoch, 52 cm breit und 51 cm tief.
 Krankentisch höhenverstellbar (82–112 cm) und
 neigungsverstellbar. Abmessungen der Tischplatte: 60 x 36 cm.
 Rollen 50 mm ohne Bremse

Art. 193753

Institutionen CHF 1'123.55 exkl. MwSt



NACHTTISCH ARMINIUS

Mit integriertem Esstisch, höhenverstellbar und neigbar.
 Bezug des Nachttischs und der Tischplatte
 aus Kunstharz mit abgerundeten Kanten.
 Höhe 88 cm, Breite 54,5 cm, Tiefe 45 cm,
 ausgeklapptes Esstischblatt 125 cm.
 Nachttischfläche 54,5 x 45 cm,
 Tischplatte 55 x 36 cm.

Art. 223637

Institutionen CHF 776.05 exkl. MwSt.



STUHL MIT ARMLEHNEN LIZA

Stuhl mit optimalem Halt und lang anhaltendem Komfort.
 Die gepolsterte Rückenlehne passt sich natürlich der Krümmung des Rückens an.
 Gestell aus gedämpfter und gebeizter massiver Buche
 Sitzhöhe: 46 cm
 Sitzbreite: 47 cm
 Gesamttiefe: 59 cm
 Sitztiefe: 44 cm
 Gesamthöhe: 86 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-LIZA1AC0AV00

Institutionen **CHF 425.70** exkl. MwSt.



STUHL MIT ARMLEHNEN LIZA HOHE RÜCKENLEHNE

Stuhl mit hoher Rückenlehne, geeignet für größere Personen
 Stuhl mit optimalem Halt und lang anhaltendem Komfort.
 Die gepolsterte Rückenlehne passt sich natürlich der Krümmung des Rückens an.
 Gestell aus gedämpfter und gebeizter massiver Buche
 Sitzhöhe: 46 cm. Sitzbreite: 47 cm
 Gesamttiefe: 63 cm. Sitztiefe: 44 cm
 Gesamthöhe: 104 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-LIZA1AC0AV00H

Institutionen **CHF 457.40** exkl. MwSt.



STUHL MIT ARMLEHNEN JULIA

Die Armlehnen bieten eine stabile und natürliche Stütze und erleichtern Bewegungen erleichtern. Mit seiner mittelhohen Rückenlehne und seiner großzügigen Sitzfläche passt er sich jedem Körperbau an und bietet optimalen Komfort.
 Sitzhöhe: 48 cm. Sitzbreite: 50 cm
 Gesamttiefe: 60 cm. Sitztiefe: 46 cm
 Gesamthöhe: 87 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO- JULIA1AC0AV00

Institutionen **CHF 493** exkl. MwSt.



STUHL MONICA XL

Der solide und elegante Stuhl Monica dank seiner verstärkten Struktur **bis zu 200 kg**.
 Sitzhöhe: 49 cm. Sitzbreite: 56 cm
 Armlehnenhöhe: 66 cm. Gesamttiefe: 63 cm
 Sitztiefe: 47 cm. Gesamthöhe: 90 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-MONI1AC0BERG00

Institutionen **CHF 605.90** exkl. MwSt.



STUHL LILY, XL, ROBUST UND ELEGANT

Dank seiner verstärkten Struktur **für bis zu 200 kg geeignet**.
 Er bietet unvergleichlichen Komfort dank einer ergonomischen Sitzfläche, die für eine optimale Stützung des unteren Rückens konzipiert ist.
 Sitzhöhe: 48 cm
 Sitzbreite: 45 cm
 Armlehnenhöhe: 65 cm
 Gesamttiefe: 64 cm
 Sitztiefe: 46 cm
 Gesamthöhe: 88 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-LILY1AC0BERG00

Institutionen **CHF 653.40** exkl. MwSt.




GEPOLSTERTER STUHL ZAZA

Mit gepolsterten Armlehnen, weich und einladend die die Unterarme stützen
 Sitzhöhe: 48 cm. Sitzbreite: 47 cm
 Gesamttiefe: 60 cm. Sitztiefe: 47 cm
 Gesamthöhe: 82 cm
 Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-ZAZA1AC0BE00

Institutionen **CHF 629.65** exkl. MwSt.

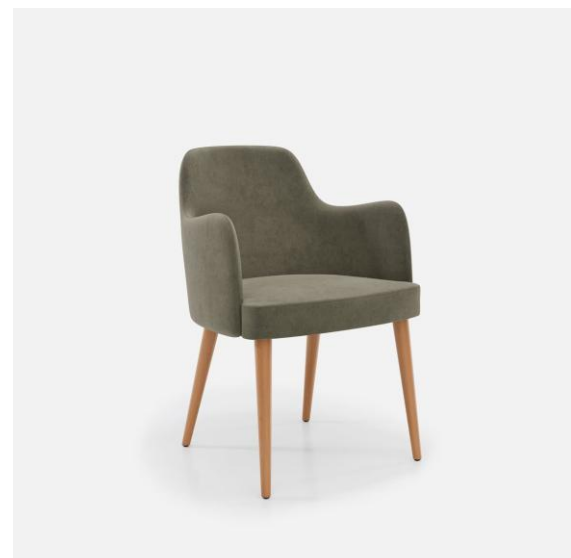

SULLY-SESSEL, FESTSTEHEND

Bequemer Sessel, der Stil und Komfort vereint. Mit Die großzügige Polsterung und der hochdichte Schaumstoff sorgen für umfassenden Komfort.

Sitzhöhe: 44 cm

Armlehnenhöhe: 63 cm

Sitzbreite: 44 cm

Gesamttiefe: 82 cm

Sitztiefe: 45 cm

Gesamthöhe: 107 cm

Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-SULLY1AF0

Institutionen **CHF 772.20** exkl. MwSt.



SESSEL LIZA FIX

Bequemer und eleganter Sessel mit hoher Rückenlehne und langen, breiten Armlehnen aus Massivholz.

Mit ergonomischer Sitzfläche, die das Sitzen und Aufstehen erleichtert.

Sitzhöhe: 48 cm

Armlehnenhöhe: 65 cm

Sitzbreite: 47 cm

Gesamttiefe: 70 cm

Sitztiefe: 45 cm

Gesamthöhe: 120 cm

Verschiedene Stoffbezüge zur Auswahl

Art. PRO-LIZA1AF0

Institutionen **CHF 867.25** exkl. MwSt.



CAREMAT-ALARMTEPPICH MIT KABEL UND GRIFF

Empfindliche Matte CAREMAT, gelb.
Rutschfeste Struktur mit abgeschrägten Kanten und integrierten Griffen.
Lieferung mit 3 m Kabel und JACK-Stecker, kompatibel mit GETS-System
Zum Anschluss an das Rufsystem für desorientierte und verwirrte Patienten.
Beständig gegen Reinigungsmittel und Körperlotionen.
Neues Modell mit reparierbarem Kabel.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303410 1100 x 700 mm
Institutionen CHF 726.- exkl. MwSt.

Art. 303417 700 x 400 mm
Institutionen CHF 517.- exkl. MwSt.



DRAHTLOSE CAREMAT-ALARMTEPPICHE MIT GRIFF

Empfindliche Matte CAREMAT in Gelb oder Grau.
Rutschfeste Struktur mit abgeschrägten Kanten mit integrierten Griffen.
Lieferung mit kabellosem Empfänger ELDAT RCL07 und JACK-Stecker, kompatibel mit dem GETS-System.
Zum Anschluss an das Patientenrufsystem für desorientierte und verwirrte Patienten. Beständig gegen Reinigungsmittel und Körperlotionen.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303416 1100 x 700 mm
Institutionen CHF 957.- exkl. MwSt.

Art. 303388 700 x 400 mm
Institutionen CHF 731.50 exkl. MwSt.



LAMPE DERUNGS CULTA LED

Der Leuchtenkopf ist um 240° drehbar
 Einfach zu positionieren dank Schwanenhalsarmatur
 Ansprechendes, elegantes Design
 Intuitive Bedienung dank Zugschalter
 Satinierter Lampenschirm
 Geeignet für medizinische Räume
 gemäß DIN 60598-2-25 und für Pflegeeinrichtungen

Art. D15.727.00 CULTA LED S4 P S3, Kabelschalter,
 auf flexiblem Arm

Institutionen CHF 271.70 exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen:

Art. D13.231.00 System zur Wandbefestigung **CHF 25.50** exkl. MwSt

Art. D14.152.00 Adapter für Nachttisch **CHF 20.-** exkl. MwSt

Art. D15.725.000 CULTA LED S4 P S9, Schalter am Kabel,
 auf flexiblem Arm zur Installation in der Aussparung
 Lieferung mit Befestigungsteilen

Institutionen CHF 284.- exkl. MwSt.



LAMPE DERUNGS AMALIA

LED-Technologie 1 000 lx / 0,5 m
 Beleuchtungsfeld 450 mm
 Leselicht in Warmweiß (3 000 K),
 Nachtlicht in Bernsteinfarbe
 Sensor-Taster ON/OFF zum Schalten
 Griff mit beleuchtetem Sensor-Taster EIN/AUS
 Flexibler, kunststoffummantelter Arm.
 Geeignet für verschiedene Befestigungselemente

Art. D15.250.000 Amalia 9 P S4, **LED** für die Wand- oder Nachttischbefestigung

Institutionen CHF 729.30 exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen:

Art. D13.231.00 System zur Wandbefestigung **CHF 25.50** exkl. MwSt.

Art. D14.152.00 Adapter für Nachttisch **CHF 20.-** exkl. MwSt.

Art. D15.252.000 Amalia 9 B S8, **LED** für den Einbau in die Aussparung,
 Lieferung mit Befestigungsteilen

Institutionen CHF 562.10 exkl. MwSt.

Derungs 
 MEDICAL LIGHTING

